


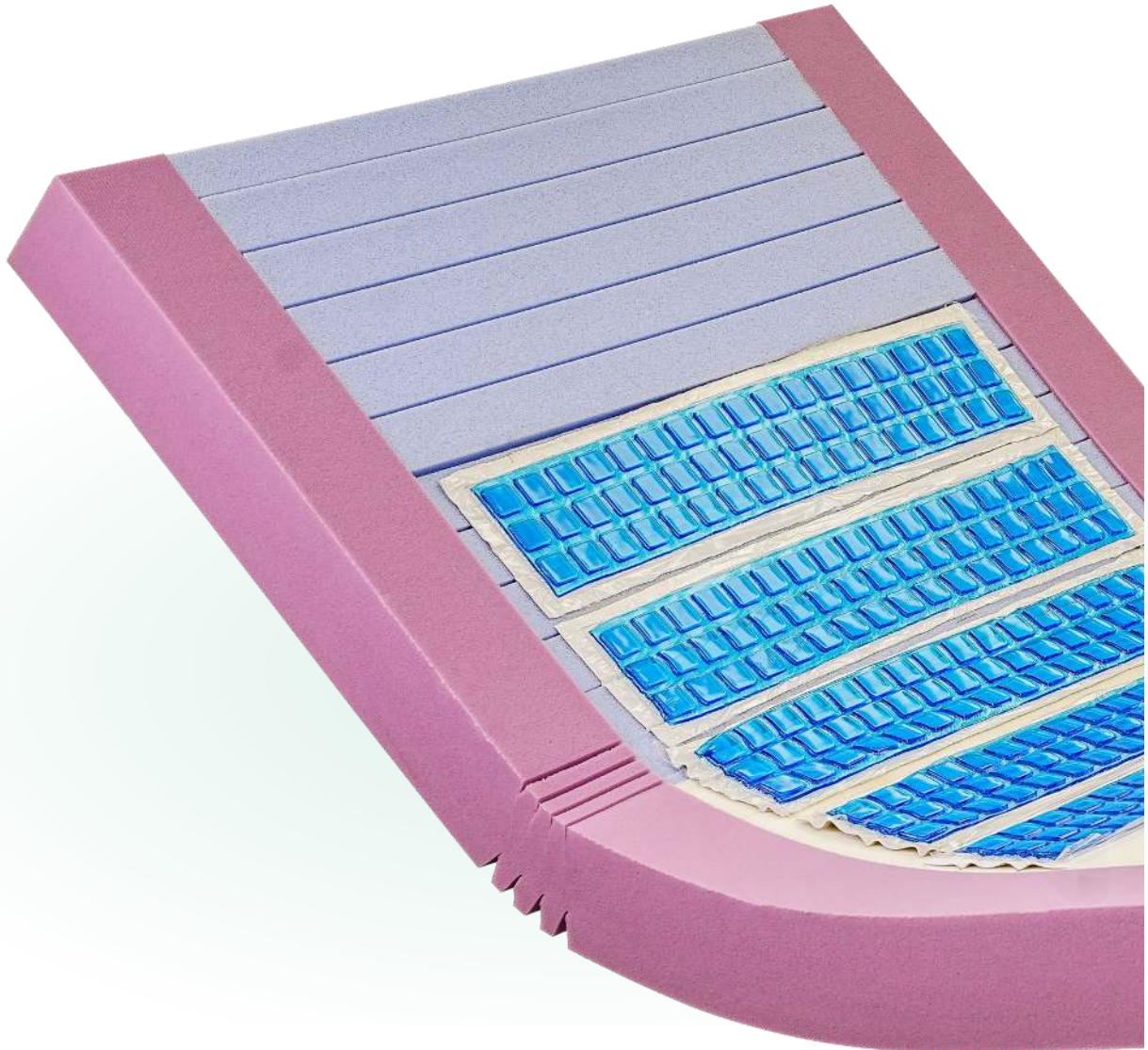

PRESSURE-RELIEVING MATTRESS WITH MEDICAL GEL MN-SKP028

ที่นอนป้องกันแผลกดทับ ชั้นบนเจลทางการแพทย์

โฟม 3 โซนต่างความหนาแน่น · เจลทางการแพทย์หนา 0.5 ซม. ระบายความร้อน · โฟมเส้นเท้าเจาะรู · ผ้าหุ้ม PU กันน้ำ ถอดซักได้ · รับน้ำหนัก 250 กก. · ผ้าหุ้มกันไฟมาตรฐาน BS EN 597

สำหรับ ICU และหอผู้ป่วยพิเศษ

รับน้ำหนัก 250 กก.

BS EN 597

GERMANY STANDARD

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD. · ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

MUTCHANU
CORPORATION CO.,LTD.

mutchanu.co.th

โทร. 096-123-4444 · sale@mutchanu.com

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ · 2569

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ · PRODUCT OVERVIEW

กระจายแรงกด ระบายความร้อน
ป้องกันแผลกดทับตั้งแต่วันแรก

MN-SKP028 คือที่นอนป้องกันแผลกดทับแบบโฟมหลายชั้น ออกแบบสำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และหอผู้ป่วยพิเศษ ตัวที่นอนแบ่งเป็น 3 โซนตามสรีระ ใช้โฟมความหนาแน่นต่างกันเพื่อรองรับสรีระ-ไหล่ ลำตัว และส้นเท้าอย่างเหมาะสม ชั้นบนสุดเป็นเจลทางการแพทย์หนา 0.5 ซม. ที่ดูดซับและกระจายความร้อนออกจากผิวหนัง ลดอุณหภูมิผิวที่นอน เหมาะกับผู้ป่วยที่มีไข้ พร้อมผ้าหุ้ม PU กันน้ำ ไร้รอยต่อ ด้านแบคทีเรีย ถอดซักและฆ่าเชื้อได้ รองรับผู้ป่วยได้หลายท่านอน และช่วยลดความเสี่ยงของแผลกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 โซนโฟมต่างความหนาแน่น
ตามสรีระ**0.5 ซม.**ชั้นเจลทางการแพทย์
ปลอดโลหะหนัก**250 กก.**น้ำหนักรับได้ปลอดภัย
(SWL)**-58%**แรงกดรวมเทียบที่นอนเดิม
(Pressure map)

คุณสมบัติเด่น

- ✓ **ชั้นเจลทางการแพทย์ให้ความเย็นสบาย** — เจลกระจายแรงกดสม่ำเสมอ ดูดซับและระบายความร้อนจากร่างกาย ลดอุณหภูมิผิวที่นอน ตอบโจทย์การดูแลผู้ป่วยที่มีไข้
- ✓ **โฟม 3 โซนตามสรีระ** — โซนสรีระ-ไหล่นุ่ม โซนลำตัวแน่น และโซนเท้าเจาะรู กระจายแรงกดเฉพาะจุดและให้ความมั่นคงทั่วทั้งตัว
- ✓ **โฟมเมมโมรีเซลล์เปิด (Open-cell)** — อากาศไหลผ่านได้ ไม่สะสมความร้อน คืนรูปเร็วหลังรับแรงกด ให้การรองรับสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน
- ✓ **โฟมสันเท้าเจาะรู** — รองรับส่วนโค้งของข้อเท้าเติมพื้นที่ลดแรงกดที่สันเท้าและน่อง ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงแผลกดทับอันดับต้น
- ✓ **ผิวโฟมตัดลายและแบ่งชั้น** — ปรับรูปแบบ ขนาด ระยะห่าง และความลึกของร่องตัด เพื่อปกป้องบริเวณเสี่ยงสูงและเพิ่มการไหลเวียนอากาศ
- ✓ **ผ้าหุ้ม PU กันน้ำ ไร้รอยต่อ ด้านแบคทีเรีย** — ซิปปิดสนิทกันของเหลวรั่ว ถอดเปลี่ยนได้ ฆ่าเชืด้วยน้ำยาทั่วไป น้ำยาคลอรีนต่ำ หรือแอลกอฮอล์ 75%
- ✓ **ผ้าหุ้มกันไฟ BS EN 597** — ผ่านมาตรฐานความทนไฟสำหรับที่นอนในสถานพยาบาล พร้อมขอบข้างโฟมความหนาแน่นสูงเสริมความมั่นคงด้านข้าง



โครงสร้างภายใน · CORE CONSTRUCTION

โฟมหลายชั้น หลายความหนาแน่น จัดโซนตามร่างกาย

ที่นอนผลิตจากโฟมที่มีความหนาแน่นต่างกัน แบ่งเป็น 3 โซนการทำงาน ได้แก่ โซนศีรษะและไหล่ที่นุ่ม โซนลำตัวหลักที่แน่น และโซนเท้าแบบเจาะรู เพื่อกระจายแรงกดและให้ความสบายเฉพาะแต่ละส่วนของร่างกาย พร้อมความมั่นคงและการรองรับโดยรวม

โซนศีรษะและไหล่ · นุ่ม

โฟมคืนตัวสูงสีม่วง ยืดหยุ่นและระบายอากาศดีเยี่ยม รองรับศีรษะ ไหล่ และสะบัก โดยไม่กดจุด

โซนลำตัวหลัก · แน่น

โฟมความหนาแน่น 35 กก./ลบ.ม. รองรับหลังและสะโพก ให้ความแน่นสม่ำเสมอ ไม่ยุบตัวเป็นแอ่ง

โซนเท้า · เจาะรู

โฟม 30 กก./ลบ.ม. เจาะรูรับส่วนโค้งข้อเท้า ลดแรงกดที่ส้นเท้าและน่อง



ชั้นบนสุด: เจลทางการแพทย์ หนา 0.5 ซม.

TOP LAYER · MEDICAL GEL

ปลอดสารโลหะหนัก ให้สัมผัสเย็น รองรับสรีระ ผ่อนคลายและกระจายความร้อนจากร่างกาย ลดอุณหภูมิผิวที่นอน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีไข้



ฐานและขอบข้าง: โฟมความหนาแน่นสูง 35 กก./ลบ.ม.

BASE & SURROUNDING EDGES

ให้การรองรับที่มั่นคงและเสริมความแข็งแรงด้านข้าง ขอบที่นอนไม่ยุบเมื่อผู้ป่วนั่งริมเตียงหรือพลิกตัว



โฟมคืนตัวสูงสีม่วง

HIGH-RESILIENCE FOAM

ยืดหยุ่นและระบายอากาศดีเยี่ยม โครงสร้างเซลล์เปิดให้อากาศไหลผ่าน ไม่สะสมความร้อน คืนรูปเร็วหลังรับแรงกด



โฟมเท้าเจาะรู

PERFORATED FOOT DESIGN

รูเจาะทั่วแผ่นรองรับส่วนโค้งของข้อเท้าอย่างเต็มที่ บรรเทาแรงกดที่เท้าและน่อง พร้อมระบายอากาศบริเวณส้นเท้า



การปรับแต่งคุณสมบัติโฟม

เทคโนโลยีโฟมเมมโมรีเซลล์เปิด — โครงสร้างระบายอากาศได้ดีกว่าโฟมทั่วไป ป้องกันการสะสมความร้อน และคืนรูปได้เร็วหลังถูกกดทับ จึงให้การรองรับและการลดแรงกดที่สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน

การตัดลายผิวและการแบ่งชั้น — ปรับรูปแบบลาย ขนาด ระยะห่าง และความลึกของร่องตัด เพื่อปกป้องบริเวณเสี่ยงสูง แบ่งโซนกระจายแรงกด เพิ่มการไหลเวียนอากาศ และให้ความสบายสูงสุด

ผ้าหุ้มและการดูแลรักษา · COVER & CARE

ผ้าหุ้ม PU กันน้ำ ไร้รอยต่อ ด้านแบคทีเรีย



- ✓ วัสดุ PU กันน้ำ ถอดเปลี่ยนได้ — ของเหลวไม่ซึมถึงโฟมด้านใน ถอดซักหรือเปลี่ยนผ้าหุ้มใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนที่นั่งนอนทั้งผืน
- ✓ ดีไซน์ไร้รอยต่อ ด้านแบคทีเรีย — ตะเข็บเชื่อมปิดสนิท ไม่มีร่องสะสมสิ่งสกปรก ลดการสะสมของเชื้อโรค
- ✓ ซิปนิรภัยกันรั่ว — ซิปซ่อนใต้แถบปิด ป้องกันของเหลวรั่วเข้าทางซิป ฆ่าเชื้อได้ง่าย
- ✓ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ — ใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป น้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีนต่ำ หรือแอลกอฮอล์ 75% แล้วตากให้แห้งที่อุณหภูมิต่ำ
- ✓ สีผ้าหุ้มเลือกได้ — ■ น้ำเงินเทา และ ■ เทาอ่อน

ซิปนิรภัยกัน
ของเหลว
รั่วเช็ด
ทำความสะอาด
ง่ายตะเข็บ
เชื่อมไร้
รอยต่อซิปซ่อนใต้
แถบปิด

สัญลักษณ์การดูแลรักษา



ประโยชน์ทางคลินิกและการบริหาร

✓ ผู้ลัพท์ทางคลินิกดี
ขึ้น

การกระจายแรงกดที่ดีเยี่ยม
ช่วยป้องกันการเกิดแผลกด
ทับ ลดวันนอนโรงพยาบาล
และภาวะการดูแลแผล

✓ ลดภาระค่าใช้จ่าย

ออกแบบเพื่อคุณภาพและ
ความทนทาน ใช้งานได้
ยาวนาน ผ้าหุ้มเปลี่ยนได้
โดยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งผืน คุ่ม
ค่าต่อการลงทุน

✓ ลดความเสี่ยงการ
บาดเจ็บ

ขอบข้างเสริมความแน่นและ
ผ้าหุ้มกันไฟ ลดความเสี่ยง
การตกเตียงและส่งเสริมการ
เคลื่อนไหวของผู้ป่วย

✓ ผ่านการพิสูจน์ทาง
คลินิก

ผลทดสอบอิสระยืนยันการ
กระจายแรงกดและการจัดการ
แรงเฉือน (shear) ที่ดีเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค · TECHNICAL SPECIFICATIONS


ข้อมูลจำเพาะ MN-SKP028

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Product Information

รุ่น Model	MN-SKP028
ความยาว Length	1920 มม.
ความกว้าง Width	850 มม.
ความหนา Height	สั่งผลิตได้ตามต้องการ
น้ำหนักรับได้ ปลอดภัย Safe working load	250 กก.
มาตรฐานกันไฟผ้า หุ้ม Cover fire rating	BS EN 597
ชั้นบน Toplayer	เจลทางการแพทย์ หนา 0.5 ซม. ปลอดภัยทนหนัก
โฟมหลัง-สะโพก Torso foam	35 กก./ลบ.ม. ความแน่น สม่ำเสมอ
โฟมเท้า Foot foam	30 กก./ลบ.ม. เจาะรู
ฐานและขอบข้าง Base & edges	โฟมความหนาแน่นสูง 35 กก./ ลบ.ม.
ผ้าหุ้ม Cover	PU กันน้ำ ไร้รอยต่อ ด้าน แบคทีเรีย ชีบกั้นรั้ว ถอดเปลี่ยน ได้ · สีน้ำเงินเทา / เทาอ่อน

ผลทดสอบแผนที่แรงกด · Pressure Map

ระบบแผนที่แรงกดวัดแรงกดระหว่างร่างกายกับพื้นผิวที่นอนด้วยแผ่นเซ็นเซอร์ 4,796 จุด บนพื้นที่ 1,159 ตร.ซม. เปรียบเทียบที่นอน MN-SKP028 กับที่นอน โฟมทั่วไปในท่านอนเดียวกัน

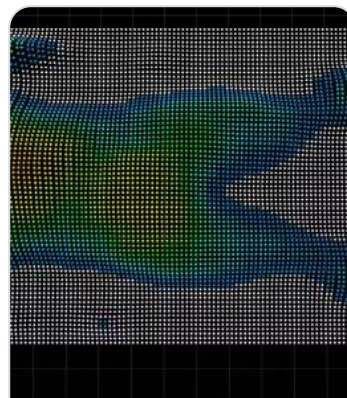MN-SKP028 ที่นอนป้องกัน
แผลกดทับ

9.98


แรงกด
เฉลี่ย

200

แรงกด
สูงสุด

47,880

แรงกดรวม

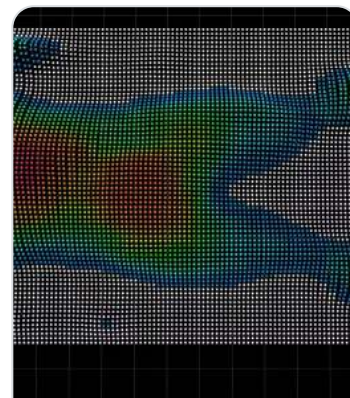

ที่นอนเดิม

โฟมทั่วไป

24.04

แรงกด
เฉลี่ย

398

แรงกด
สูงสุด

115,130

แรงกดรวม

ผลลัพธ์: แรงกดเฉลี่ยลดลง 58% แรงกดสูงสุดลดลง 50% และแรงกดรวมลดลง 58% บริเวณสีแดง-ส้ม (แรงกดสูง) ที่สะบัก สะโพก และส้นเท้าของที่นอนเดิม เปลี่ยนเป็นสีเขียว-น้ำเงินบน MN-SKP028

MUTCHANU
CORPORATION CO., LTD.

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD.

59/316 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

www.mutchanu.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

โทร. 096-123-4444

LINE ID

0961234444

อีเมล

sale@mutchanu.com

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ สำหรับโรงพยาบาล คลินิก ตัวแทนจำหน่าย และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน · เข้ากับเตียงผู้ป่วย MUNICH ทุกรุ่น สั่งผลิตขนาดพิเศษได้

MUNICH®
GERMANY STANDARD EST. 1980

MUNICH — แบรนดเครื่องหมายการค้าการแพทย์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยโดย บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด · ข้อมูลในเอกสารนี้อ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิต รุ่น SKP028 สีและสัมผัสของสินค้าจริงอาจต่างจากภาพเล็กน้อยตามกระบวนการพิมพ์ คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงของผู้ผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า · เครื่องมือแพทย์ โปรดอ่านฉลากและคู่มือการใช้งานก่อนใช้ · © 2569 บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด