

PATSLIDE® PATIENT TRANSFER BOARD · MADE IN AUSTRALIA · CE



แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ · PRODUCT CATALOG 2569

PATSLIDE® แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ย้ายผู้ป่วยจากเตียงสู่เปล โต๊ะผ่าตัด หรือเตียงเอกซเรย์ได้ใน 3 ขั้นตอน โดยไม่ต้องยก ลดการบาดเจ็บหลังของพยาบาลและความไม่สบายของผู้ป่วย

แผ่นแข็งแรงน้ำหนักเบา ผิวลื่นพิเศษ ทนแรงกระแทก · โปร่งรังสี (Radio-lucent) ใช้ได้ตัวผู้ป่วยขณะเอกซเรย์ได้ · ป้องกันไฟฟ้าสถิต · เช็ดล้างฆ่าเชื้อง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา · 6 ขนาดให้เลือกตามแผนก · จำหน่ายและบริการโดยบริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MADE IN AUSTRALIA

CE 93/42/EEC

Radio-lucent

6 ขนาด

ใช้ทั่วโลก

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD. · ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

MUTCHANU
CORPORATION CO.,LTD.

mutchanu.co.th

โทร. 096-123-4444 · sale@mutchanu.com

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ · 2569

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ · PATIENT TRANSFER MADE EASY

ย้ายผู้ป่วยได้ง่าย ปลอดภัย ทั้งผู้ป่วยและบุคลากร

ในแต่ละวันโรงพยาบาลต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างเตียง เพล โต๊ะผ่าตัด และเตียงตรวจนับครั้งไม่ถ้วน การยกผู้ป่วยด้วยแรงคนเป็นสาเหตุสำคัญของอาการปวดหลังและการบาดเจ็บของพยาบาล ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียชั่วโมงทำงานและความพิการระยะยาวของบุคลากร PATSLIDE® คือแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ออกแบบให้เป็น "สะพาน" เชื่อมระหว่างเตียงกับเพล ผู้ป่วยถูกดึงเลื่อนบนผ้าขาวเตียงผ่านผิวลื่นของแผ่นโดยไม่ต้องยก ใช้เพียง 2 คน ใช้เวลาไม่กี่วินาที และไม่สร้างความเจ็บปวดหรือความกังวลให้ผู้ป่วย

PATSLIDE® ผ่านการใช้งานจริงในโรงพยาบาลทั่วโลกมาหลายสิบปี พิสูจน์แล้วว่าช่วยลดอุบัติเหตุการบาดเจ็บหลังจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน จึงเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีประจำหอผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด แผนกรังสีวิทยา และทุกจุดที่ต้องการความรวดเร็วและความง่ายในการทำงาน

คุณสมบัติเด่น

- ✓ **ปลอดภัยและใช้งานง่าย** — ย้ายผู้ป่วยด้วย 2 คนใน 3 ขั้นตอน ไม่ต้องยก ไม่ต้องฝึกซับซ้อน
- ✓ **ป้องกันไฟฟ้าสถิต (Static insulative)** — ปลอดภัยเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์และในห้องผ่าตัด
- ✓ **น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น (Lightweight & resilient)** — แผ่นโค้งอรับสรีระได้และคืนตัว พยาบาลคนเดียวถือได้ด้วยมือจับ
- ✓ **โปร่งรังสี (Radio-lucent)** — วางใต้ตัวผู้ป่วยขณะถ่ายภาพเอกซเรย์ได้โดยไม่บดบังภาพ
- ✓ **ทนแรงกระแทกสูง** — วัสดุพิเศษไม่แตกร้าวจากการใช้งานหนักและการตกกระแทก
- ✓ **ทำความสะอาดง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา** — ผิวเรียบไม่มีรูพรุน เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปได้ ไม่มีชิ้นส่วนสึกหรอ

**2 คน**ย้ายผู้ป่วยได้
โดยไม่ต้องยก**3 ขั้นตอน**ใช้เวลาไม่กี่วินาที
ต่อการย้าย 1 ครั้ง**Radio-lucent**ใช้ในห้องเอกซเรย์
และ CT ได้**0 บำรุงรักษา**ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว
ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง

เหมาะสำหรับ

หอผู้ป่วยใน · ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน · ห้องผ่าตัดและห้อง
พักฟื้น · แผนกรังสีวิทยา CT / MRI · ICU · ห้องคลอด ·
รถพยาบาลและหน่วยกู้ชีพ · สถานดูแลผู้สูงอายุ

วิธีใช้งาน · TRANSFER IN 3 EASY STEPS

ย้ายผู้ป่วยใน 3 ขั้นตอน **ไม่ต้องยก****1 สอดแผ่นใต้ตัวผู้ป่วย**

คลายผ้าขาวเตียง (drawsheet) ใต้ตัวผู้ป่วยทั้งสองข้าง เช้นเปลรับมาชิดข้างเตียง ผู้ส่งเอื้อมจับผ้าขาวที่ระดับไหล่และสะโพก แล้วพลิกตัวผู้ป่วยเข้าหาตัวเล็กน้อย ผู้รับสอดขอบแผ่น PATSLIDE® ใต้ตัวผู้ป่วย แล้ววางผู้ป่วยลง

**2 เลื่อนผู้ป่วยข้ามสะพาน**

แผ่นวางพาดระหว่างเตียงกับเปลเป็นสะพานเรียบ ผู้รับจับผ้าขาวที่ระดับทร้องอกและกลางต้นขา ดึงผู้ป่วยเข้าหาตัว ขณะที่ผู้ส่งช่วยยกเบาๆ ผู้ป่วยจะเลื่อนไปกลางเปลอย่างนุ่มนวล

**3 ดึงแผ่นออก**

จับมือจับของแผ่น PATSLIDE® แล้วดึงออกจากใต้ตัวผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายเสร็จสมบูรณ์โดยผู้ป่วยแทบไม่รู้สึกรถึงการเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

- PATSLIDE® ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับยก ห้ามใช้ยกหรือหามผู้ป่วย ให้ใช้เลื่อนผู้ป่วยตามขั้นตอนที่ระบุเท่านั้น
- ล็อกล้อเตียงและเปลทุกครั้ง และปรับระดับให้เท่ากันก่อนเคลื่อนย้าย

ขนาดและรุ่น · Sizes

รหัส	รุ่น	ความยาว (มม.)	ความกว้าง (มม.)	การใช้งานที่แนะนำ
PS-AP	All Purpose · อเนกประสงค์	1,525	635	แผ่นมาตรฐานสำหรับห่อผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน และรังสีวิทยา
PS-TH	Theatre · ห้องผ่าตัด	1,525	560	แคบลงเล็กน้อยเพื่อใช้กับโต๊ะผ่าตัด
PS-MN	Mini · ขนาดเล็ก	1,400	635	สั้นลง เหมาะกับผู้ป่วยตัวเล็กและพื้นที่จำกัด
PS-SL	Slimline · แบบแคบ	1,400	480	แคบพิเศษสำหรับเครื่อง CT / MRI และเปลแคบ
PS-D2	Duo-Set · ชุด 2 ชั้น	750 (ต่อชั้น)	635	แยกเป็น 2 แผ่น จัดเก็บและพกพาสะดวก
PS-T3	Tri-Set · ชุด 3 ชั้น	500 (ต่อชั้น)	635	แยกเป็น 3 แผ่น สำหรับรถพยาบาลและหน่วยกู้ชีพ

ข้อมูลจำเพาะ

วัสดุแผ่นโพลีเอสเตอร์เชิงฉนวน ป้องกันไฟฟ้าสถิต โปร่งรังสี · มือจับสำหรับดึงและถือ · ผลิตในประเทศออสเตรเลียโดย Briggate Medical Company · เครื่องมือแพทย์ CE ตาม Council Directive 93/42/EEC

การดูแลรักษา

เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปหลังใช้ทุกครั้ง ผึ่งให้แห้ง เก็บในแนวตั้งหรือแขวนข้างเตียง/ผนัง ไม่ต้องห่อลื่นหรือเปลี่ยนอะไหล่

บริการจากผู้จำหน่าย · DISTRIBUTOR SERVICES

ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เสนอราคาถึงดูแลหลังการขาย

1

ขอใบเสนอราคา

แจ้งขนาดและจำนวนตาม
แผนก บริษัทฯ จัดทำใบ
เสนอราคาพร้อมเอกสาร
คุณลักษณะเฉพาะภาษา
ไทยสำหรับงานจัดซื้อ

2

สาธิตและทดลองใช้

นำแผ่นตัวอย่างไปสาธิต
ถึงหอผู้ป่วย ให้ทีม
พยาบาลทดลองย้ายผู้
ป่วยจริง

3

ส่งมอบและอบรม

จัดส่งพร้อมอบรมเทคนิค
3 ขั้นตอน การเลือกขนาด
และการทำความสะอาด
ให้บุคลากร

4

บริการหลังการขาย


รับประกันคุณภาพและให้
คำปรึกษาการใช้งาน
ตลอดอายุผลิตภัณฑ์



สอดแผ่นใต้ตัวผู้ป่วย



เลื่อนผู้ป่วยข้ามสะพาน

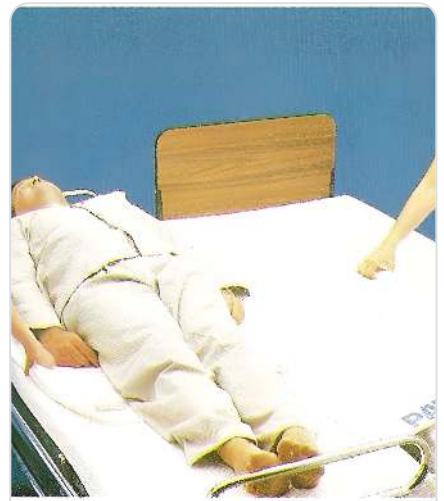

ดึงแผ่นออก เสร็จสิ้น

MUTCHANU
CORPORATION CO., LTD.

จำหน่ายโดย · DISTRIBUTED BY

บริษัท มัจฉานุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

MUTCHANU CORPORATION CO., LTD.

59/316 หมู่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

www.mutchanu.co.th

ติดต่อฝ่ายขาย

โทร. 096-123-4444

LINE ID

0961234444

อีเมล

sale@mutchanu.com

PATSLIDE
Patient Transfer

PATSLIDE® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Briggate Medical Company ประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารผู้ผลิตและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า · แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2569